

温度はかる先生スタンドセット クイックガイド


MR-NALBESET

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
クイックガイドをよくお読みのうえ、正しくお使いください。

1. 付属品



2. 各部説明

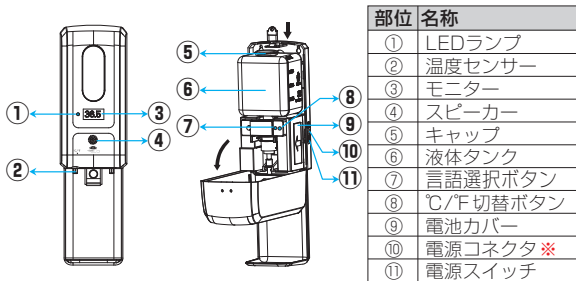

※電源コネクタは使用できません。

3. 設置方法

詳しい内容は別紙 **温度はかるシリーズスタンド**
のクイックガイドをご参照ください。

4. ご使用前の準備

必ず事前の動作確認を行ってからご使用ください。

本体を15～40℃の環境下に30分ほど室温に慣らしてからご使用ください。

1 液体アルコールを補充




※【液漏れ対策】本体にアルコールを補充する際、じょうごを使用してください。


2 乾電池 アルカリ乾電池 (単二形) × 4本



6. LEDランプの説明

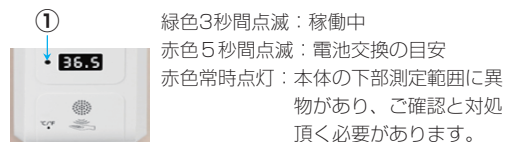


5. 使用方法

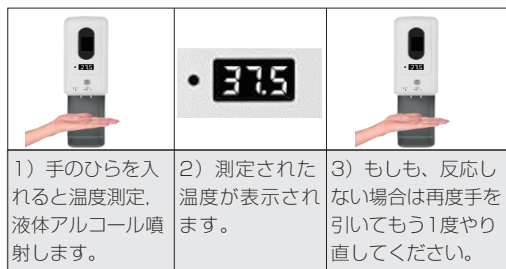

表示	温度	音声設定オンの時
正常	36.2	32～37.4℃ 温度正常
高温	38	37.5～43℃ 「ピーピーピーピー」
再測定	HI	43℃以上 「もう一度お願いします」
再測定	Lo	32℃以下 「もう一度お願いします」

7. 各種機能

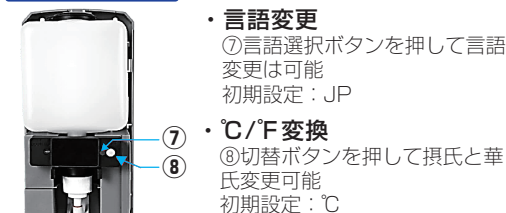

言語 (音声) (12 か国語/ オフへ変更)

JP	IE	De	Fr	ru	NL	Ar
日本語	イタリア語	ドイツ語	フランス語	ロシア語	オランダ語	アラビア語
oFF	Ch	En	tO	Pt	ES	
音声オフ	中国語	英語	韓国語	ポルトガル語	スペイン語	

8. 仕様

商品名	温度はかる先生スタンドセット
測定方式	赤外線
表示単位	0.1℃
入力電圧電流	6V/1A
ボトル容量	1000ml
アラーム方式	異常自動警報+アラーム音+音声案内
設置方法	スタンド
温度測定部位	手のひら

測定範囲	34～43℃
測定精度	±0.2℃
測定距離	約1～8cm
温度の単位	摂氏・華氏
使用環境湿度	10.0～40.0℃/≤85%RH
本体寸法	約16×26×10.5cm
本体質量	約870g

※本製品は液体アルコールの消毒液専用です。ジェルタイプや次亜塩素酸等は絶対に使用しないでください。

9. よくあるご質問

不具合の疑いのある場合、まずは「動作確認」を行っていただけますでしょうか。

動作確認 1. 電力不足

乾電池の電力が不足すると、製品の動作は不安定になります。新しい乾電池と交換してください。

動作確認 2. 消毒液の噴射 (感度センサーの反応)

感度センサーは、黒以外の色、距離15cm程度に異物があると反応して噴射することがあります。必ず、専用トレイ、またはスタンドのトレイを必ずご使用ください。

動作確認 3. 動作温度 (本体が冷え過ぎたり、熱くなりすぎた状態)

本体自体が冷えすぎたり、熱くなりすぎると、うまく動作しなかったり、動作が不安定になります。15～30℃の室内で温度を慣らして、動作温度範囲の状態にしてからご使用ください。

☆液体アルコール以外の消毒液を使わないでください。

温度はかる先生はアルコール専用のため、次亜塩素酸などの他の消毒液はご使用になれません。本体機器が故障してしまします。



もっと詳しい内容は QR コードまたはご購入された商品のページにある「サポート」をご確認ください。

10. ご注意事項

ご使用前に、必ず 注意事項をよくお読みいただき、正しくお使いください。製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。注意事項を守らずに使用した場合や、製造業者以外が修理、改造、再調整した場合、発生した事故に対しての一切の責任を負いかねます。

※本製品は液体アルコールの消毒液専用です。ジェルの消毒液は絶対に使用しないでください。

※本製品は火気を絶対に近づけないでください。

※本機は表面温度を測定する製品です。医療用の温度計ではありません。

以下の場合、正しい温度を表示できない場合があるためご注意ください。

＜測定時のご注意：本体、手のひら＞

- ・エアコンや暖房の近くなど風の当たる場所で測定した場合。
 - ・直射日光など環境により温まっている場合。
 - ・汗などで濡れている場合 (手のひら)
 - ・測定する場所とは異なる温度差のある場所にいた場合。
 - ・測定の妨げになるものがセンサーの間にある場合。
 - ・指定の使用温度、湿度範囲外で使用しない。
- 上記の場合、正しい測定精度を保証できません。

■測定について

- ・温度測定は手の平で行ってください。手のひら以外の場所で測定すると正確に測定できない場合があります。

■取扱いについて

- ・お子様だけの使用や、幼児の手の届く所に保管しないでください。ケガの恐れがあります。
- ・落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ・分解・修理・改造を行わないでください。
- ・故障や誤作動の原因になります。
- ・本体に動作に異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・本製品を廃棄する場合は、各自治体の規則に従い適切に処分する。
- ・本製品は防水仕様設計ではありません。

※注意：画像はイメージです。

※実物とデザイン、色など異なる場合がございます。

※弊社は製品の改良や品質向上などの理由により、予告なく一部同梱物内容を変更する場合があります。これは欠品ではありませんので予めご了承ください。

11. 保証規定

- ・保証期間は新品購入日から3ヶ月です。転売品など所有権譲渡品、中古売品は理由を問わず保証対象外となります。
- ・保証期間内のサポートサービスには「ご購入日を確認できるレシートなどの証明書」が必要のため大切に保管してください。
- ・保証期間内にクイックガイドの注意事項に従った正常な使用方法で故障した場合に無償対応いたします。
- ・本製品の保証は日本国内のみ有効です。The warranty of this product is valid only in Japan.
- ・点検依頼中の代替品の貸出は行っておりません。
- ・以下の場合には保証対象外になります。

1. 使用上の誤り、不当な修理と改造、調整、誤接続による故障および損傷
2. ご購入後の落下、衝撃、加圧、浸水などの不当な扱いによる故障および損傷
3. 当社の指定サービス機関以外で行われた修理、改造、分解による故障および損傷
4. 消耗によるもの、地震・雷・火災など災害によるもの (自然災害を含む)、結露、環境要因に起因する電圧の変化など
5. 保管の不備 (高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での保管等) や手入れの不備本体内部に砂やほこり、液体など異物混入) による故障および損傷
6. 本製品以外の原因で生じた故障および損傷
7. 本書の提示が無い場合又は未記入、改ざんが認められた場合
8. 付属品や消耗品類の交換
9. ご購入日を確認できるレシートなどの証明書の提示が無い場合

12. 動物おめんの使い方

楽しく検温、消毒できる！

- 1 両面テープをご用意いただき、2 本体に両面テープで貼りつけられ点々の空白部分に貼りつける。



13. サポート

当社では万全を期して製品の取扱説明書を作成しましたが、万一ご不便やご不都合などお気づきの点がありましたらサポート宛てにメールでご連絡ください。

お問い合わせ: miraion@miraion.jp 販売元: ミスターカード株式会社